

# 軽量! 低コスト実現! 検定成績書付き!

### 特長

1. UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適します。
2. 軽量で手にフィットし、疲れにくいデザインです。
3. アナログ方式ですので設定が簡単です。
4. 0.2 $\mu$ l~1,000 $\mu$ lまでサンプリングが可能です。(5種類)
5. 識別用カラープッシュボタンを採用しています。
6. チップイジェクト機能付きで楽にチップの脱着ができます。
7. 分解が簡単で、消耗部品は自分でメンテできます。
8. 検定成績書が製品毎に付いています。
9. 保証期間は1年間です。(保証規定に基づく)



### 材質

ポリカーボネート  
 (A)(B)(C)(D)(G)(H)  
 ポロプロピレン  
 (E)(F)



専用スタンド(6本架)

※UV照射可能

### 価格

| 商品No.    | 容量レンジ( $\mu$ l)  | ボタンカラー<br>(カラーコード) | 数量(本) | 定価(円)  |
|----------|------------------|--------------------|-------|--------|
| AP.S2    | 0.2~2            | グリーン               | 1     | 10,000 |
| AP.S20   | 2~20             | バイオレット             | 1     |        |
| AP.S20Y  | 2~20             | イエロー               | 1     |        |
| AP.S100  | 20~100           | イエロー               | 1     |        |
| AP.S200  | 20~200           | イエロー               | 1     |        |
| AP.S1000 | 200~1,000        | ブルー                | 1     |        |
| AP.ST06  | 専用スタンド(6本架/460g) |                    | 1     | 7,800  |

### 精度

| 商品No.        | 容量レンジ( $\mu$ l) | 精度          |
|--------------|-----------------|-------------|
| AP. S2       | 2               | $\pm 5\%$   |
| AP. S20/S20Y | 10              | $\pm 2\%$   |
|              | 20              | $\pm 1.2\%$ |
| AP. S100     | 20              | $\pm 1.5\%$ |
|              | 100             | $\pm 1\%$   |
| AP. S200     | 20              | $\pm 1.5\%$ |
|              | 200             | $\pm 0.8\%$ |
| AP. S1000    | 200             | $\pm 1.5\%$ |
|              | 1,000           | $\pm 0.5\%$ |

※精度はサンプリング技術、サンプリング環境により大きく変化します。

※精度は弊社推奨チップを使用した場合の結果です。

※測定回数は各容量レンジ4回です。

## メンテナンスについて

- キャリブレーションを必要としないメンテナンス（部品交換）を、お客様自身で行えるようにパーツ販売を行っています。尚、修理・分解に関してはお客様自身の責任のもとに行ってください。

### 価格表（部品パーツ）


| ピペット商品No. | ノーズコーン(F)  |       | イジェクター(E)  |       | Oーリング                                   |       |
|-----------|------------|-------|------------|-------|---|-------|
|           | 商品No.      | 定価(円) | 商品No.      | 定価(円) | 商品No.                                   | 定価(円) |
| AP.S2     | AP.S2NC    | 2,000 | AP.S2EJ    | 500   | Oーリングのみの販売はございません。<br>ノーズコーンにセットされています。 |       |
| AP.S20    | AP.S20NC   | 2,000 | AP.S20EJ   | 500   |   |       |
| AP.S20Y   | AP.S20YNC  | 2,000 | AP.S20YEJ  | 500   |   |       |
| AP.S100   | AP.S100NC  | 1,000 | AP.S100EJ  | 500   | AP.S100R                                | 200   |
| AP.S200   | AP.S200NC  | 1,000 | AP.S200EJ  | 500   | AP.S200R                                | 200   |
| AP.S1000  | AP.S1000NC | 1,000 | AP.S1000EJ | 500   | AP.S1000R                               | 200   |

※販売単位・定価は1個あたりです。

### 《メンテナンス時の注意事項》

#### イジェクター ワンタッチ脱着方式

- ① 下に引く
- ② そのまま引っ張る
- ③ 廻す

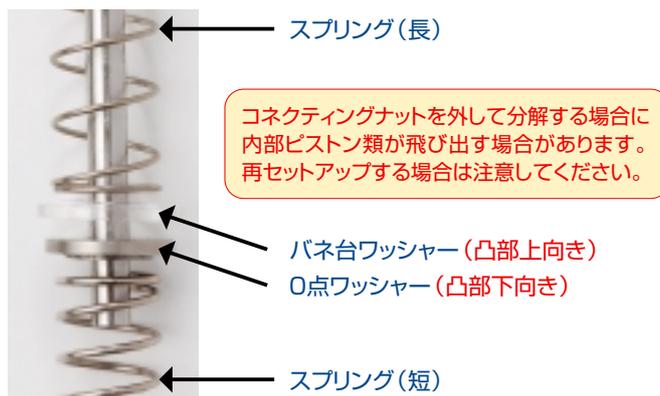

## 修理について

- 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は無償修理を致します。本商品と保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店にご依頼願います。（お買上げ後1年間保証）

- ご購入後の修理（部品交換）・調整を承ります。（費用別途）  
修理前見積りは受付けておりません。  
修理期間は約7日～10日程かかります。

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 基本料金（修理・調整）<br>（検定成績書及び修理報告書発行） | 一律 ￥3,500/本         |
| 部品（ピストン一式交換）                    | 一律 ￥3,000/一式        |
| 部品（イジェクター接続シャフト交換）              | 一律 ￥450/個           |
| 部品（プッシュボタン及びシャフト交換）             | 一律 ￥1,200/個         |
| 部品（その他）                         | 上記部品パーツ価格表をご参照ください。 |

※価格は税別です。

- お預かりした商品の状態により部品交換の必要があると判断した場合は、事前に連絡する事無く交換する場合がございます。ご了承ください。

## 重量・目盛間隔

| 商品No.        | 重量(g) | 目盛間隔(μl) |
|--------------|-------|----------|
| AP. S2       | 75    | 0.005    |
| AP. S20/S20Y | 75    | 0.05     |
| AP. S100     | 75    | 0.2      |
| AP. S200     | 75    | 0.5      |
| AP. S1000    | 90    | 2        |

### AP.S20とAP.S20Yについて

AP.S20の推奨（適合）チップは20μlクリスタルチップとなります。  
AP.S20Yの推奨（適合）チップは200μlイエローチップとなります。



|                   |   |
|-------------------|---|
| 本社                | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル<br>TEL.03-5215-5400(代) FAX.03-5215-6400      |
| 大阪支店              | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル<br>TEL.06-6339-6886(代) FAX.06-6339-8976  |
| 福岡営業所             | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル<br>TEL.092-433-3600(代) FAX.092-433-3601 |
| 埼玉事業所<br>(配送センター) | 〒369-0307 埼玉県児玉郡上里町嘉美1526-5<br>TEL.0495-35-3281(代) FAX.0495-35-3282           |

取扱店